

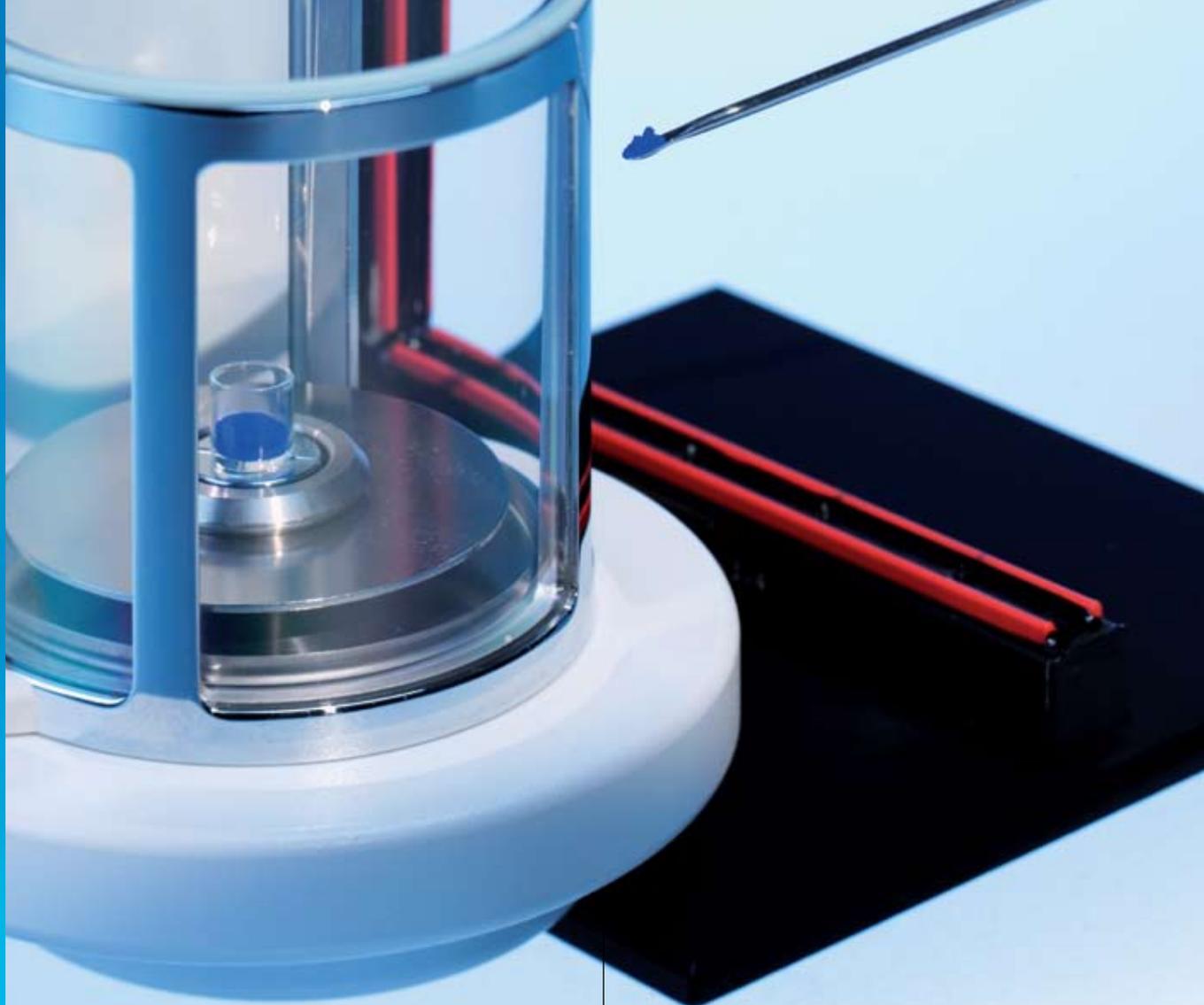
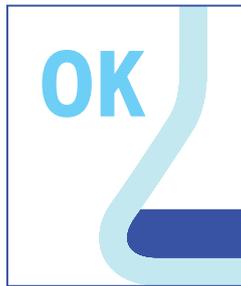


超越系列称量解决方案

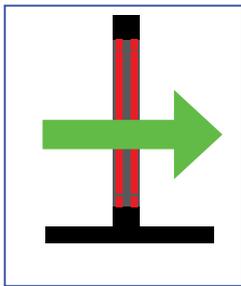


去静电装置 让您的样品免受 静电影响

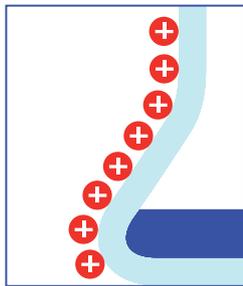

将您的样品通过U形去静电电极去静电装置可以完全消除您的样品上吸附的静电电荷，避免粉末样品的散落，确保获得至高重现性的结果。


METTLER TOLEDO

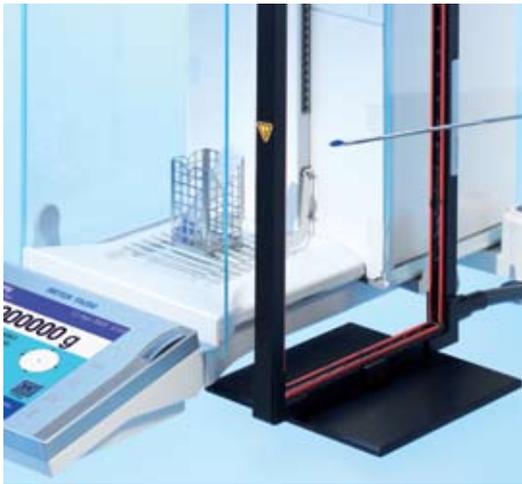

去静电装置

为您的XP分析/微量/超微量天平配备一套去静电装置。在称量之前, U形电极会自动消除样品上的静电电荷——即使触摸也能确保绝对的安全。

去静电装置

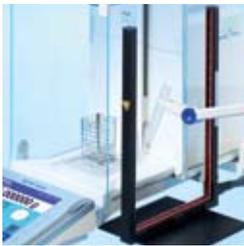

型号 通用U形去静电装置(包括U形去静电电极和通用去静电装置电源)



一体化去静电装置(包括点式去静电电极和XP天平去静电装置电源)

第二个点式去静电电极
一体化去静电装置选件

适用天平 所有型号天平

XP分析天平和XP26/56微量天平(包括DR型号)

订货号 11107767

11107761

11107762

去静电装置各配件



型号 U形去静电电极
推荐适用于所有样品和去皮容器



小型U形去静电电极
推荐适用于小型样品



点式去静电电极
推荐适用于使用抹刀进行取样



XP天平去静电装置电源
与防风门同步自动开启或关闭

通用去静电装置电源
手动开启或关闭

适用天平 所有型号天平

所有型号天平

所有型号天平

XP分析/微量/超微量天平

所有型号天平

订货号 11107764

11140161

11107765

11107763

11107766

梅特勒-托利多
实验室/过程检测/产品检测设备
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业/商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com



www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
11796363 Printed in Switzerland 2010/02