

Dessiccateurs



HE73 et HE53 **Dessiccateurs halogènes**

Résultats fiables

Utilisation simple

La qualité à moindre coût



L'importance du taux d'humidité
Analyse rapide et facile

METTLER TOLEDO

Fiable, simple et abordable

Un investissement dans la qualité

Les dessiccateurs halogènes HE73 et HE53 constituent une solution fiable et rentable pour déterminer le taux d'humidité de vos produits et ainsi garantir une qualité et une durée de conservation optimales. Robustes et abordables, ils sont le fruit de la vaste expérience de METTLER TOLEDO en matière de fabrication d'instruments de précision et de détermination du taux d'humidité.

Le HE73 et le HE53 sont simples à utiliser, même pour les opérateurs novices. Grâce à la fonction d'aide à l'écran et notre Guide sur l'humidité gratuit, vous pouvez installer rapidement l'instrument et effectuer des déterminations précises. De conception suisse, vous pouvez avoir une confiance totale en vos résultats ainsi que l'assurance de bénéficier de performances optimales sur le long terme.


Des résultats fiables



Le HE73 et le HE53 garantissent des déterminations précises et répétables du taux d'humidité, en quelques minutes seulement.

- Fiable
- Efficace
- Productivité accrue

La qualité à moindre coût

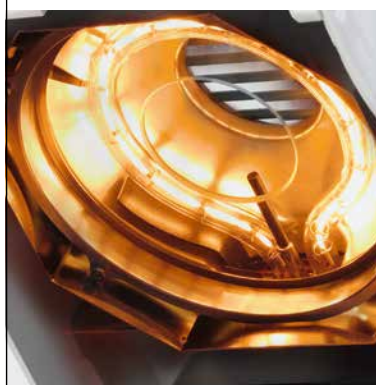

La technologie de séchage halogène et l'unité de pesage performantes offrent un excellent rapport qualité-prix.

- Technologie moderne
- Conception robuste
- Longévité optimale

L'expertise de Mettler Toledo



Bénéficiez de notre savoir-faire pour vous lancer dès maintenant dans la détermination du taux d'humidité.

- Installation rapide
- Formation en ligne
- Méthodes prêtes à l'emploi



Des résultats rapides via un processus facile en 3 étapes

Déterminer le taux d'humidité n'a jamais été aussi facile : suivez simplement le guide graphique à l'écran et vos résultats seront disponibles en quelques minutes.



1. Tarez le plateau de pesée vide.



2. Ajoutez l'échantillon et répartissez-le uniformément.





3. Appuyez sur Démarrer. Vos résultats s'afficheront à l'écran après seulement quelques minutes.

METTLER TOLEDO Service

Notre réseau de services mondial est toujours disponible pour vous assister dans les opérations d'étalonnage et de maintenance afin que vous profitiez du plein potentiel de vos dessiccateurs.

Caractéristiques techniques

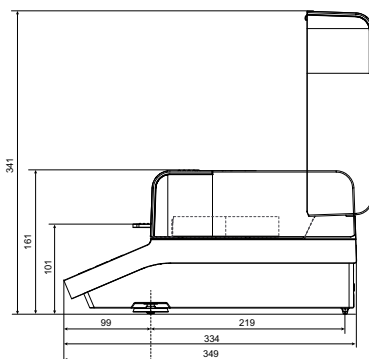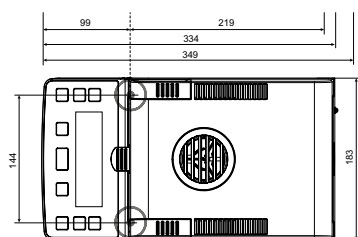

	HE73	HE53
Portée	71 g	54 g
Précision d'affichage	1 mg, 0,01 % TH	1 mg, 0,01 % TH
Répétabilité	0,15 % (échantillon de 2 g), 0,05 % (échantillon de 10 g)	0,15 % (échantillon de 2 g), 0,05 % (échantillon de 10 g)
Arrêt	Entièrement automatique, chronométré libre (1 mg/10 – 140 s)	Entièrement automatique, chronométré
Programmes de séchage	Standard, rapide	Standard, rapide
Méthodes de séchage	2	1
Plage de température	50 – 200 °C (incréments de 1 °C)	50 à 160 °C (par incréments de 1 °C)
Chauffage	Halogène	Halogène
Affichage des résultats	%MC, %DC, %ATRO MC, % ATRO DC, g	%MC, %DC, %ATRO MC, % ATRO DC, g
Écran	LCD rétroéclairé	LCD rétroéclairé
Fonctions d'affichage	Instructions, courbe de progression	Instructions, courbe de progression
Poids	4,1 kg	4,1 kg

Accessoires



Couppelles en aluminium

Idéales pour toutes les applications et garantir une répétabilité optimale.

Référence 13865



Filtres en fibre de verre

À utiliser avec des substances liquides et pâteuses pour augmenter la répétabilité et réduire le temps de mesure jusqu'à 50 %.

Référence 214464



Imprimantes

La solution la plus rapide pour documenter vos résultats.

Référence

11124300 (RS-P25)

11124303 (RS-P26)

www.mt.com/moisture

Pour plus d'informations

Mettler-Toledo AG

Laboratory and Weighing Technologies

CH-8606 Greifensee, Suisse

Tél. : +41 44 944 22 11

Fax : +41 44 944 30 60

Sous réserve de modifications techniques

© 11/2014 Mettler-Toledo AG

Imprimé en Suisse 30097230

Global MarCom Suisse