



### 필요한 모든 것

이 직관적인 고품질 저울은 간단한 칭량 작업과 신뢰할 수 있는 정확한 결과를 원할 때 사용하기 적합합니다.




### 신뢰할 수 있는 성능

정밀한 로드셀은 품질 저하 없이 신뢰할 수 있는 결과를 신속하게 제공합니다.




### 3개의 내장된 Application

간단한 칭량과 더불어, 이 저울은 계수 및 동적 칭량을 위한 내장형 칭량 분석법을 제공합니다.

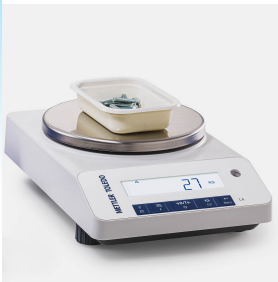

### 실용적인 품질

신뢰할 수 있는 성능과 긴 저울 수명을 위한 METTLER TOLEDO의 품질에 대한 신뢰를 바탕으로, 전반적으로 낮은 소유 비용을 보장합니다.

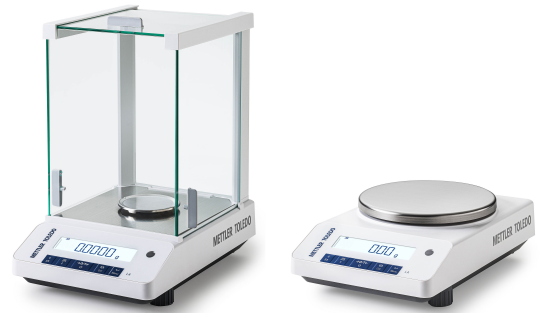

### 간단한 저울

### 신뢰할 수 있는 제품

기본적인 칭량 작업에 필요한 기능에 METTLER TOLEDO의 품질과 신뢰성을 더한 엔트리급 저울로 예산을 최대한 활용하십시오.

내장된 Application은 결과 계산을 자동으로 수행하여 일관된 프로세스를 보장하고 오류를 최소화합니다. 또한 저울을 프린터, 보조 디스플레이 또는 컴퓨터에 간단하게 연결하여 결과를 빠르고 오류 없이 문서화할 수 있습니다.

# 기술 사양



	LA84E	LA104E	LA204E
<b>한계값</b>			
용량	82 g	120 g	220 g
해독도	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
반복성(5% 하중에서)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
선형성 편차	0.2 mg	0.2 mg	0.2 mg
<b>Typical Value</b>			
반복성(5% 하중에서)	0.08 mg	0.08 mg	0.08 mg
선형성 편차	0.08 mg	0.08 mg	0.08 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	160 mg	160 mg	160 mg
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	16 mg	16 mg	16 mg
안정화 시간	3 s	3 s	3 s
<b>치수 및 기타 사양</b>			
저울 치수(W x D x H)	210 x 308 x 345 mm	210 x 308 x 345 mm	210 x 308 x 345 mm
칭량 팬 지름	80 mm	80 mm	80 mm

- ▲ 내부 중량 조정 후
- ▼ 5% 하중, k = 2에서 측정



	LA203E	LA403E	LA2002E	LA4002E
<b>한계값</b>				
용량	220 g	420 g	2200 g	4200 g
해독도	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg
반복성(5% 하중에서)	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg
선형성 편차	2 mg	2 mg	20 mg	20 mg
<b>Typical Value</b>				
반복성(5% 하중에서)	0.7 mg	0.7 mg	7 mg	7 mg
선형성 편차	0.6 mg	0.6 mg	6 mg	6 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	1.4 g	1.4 g	14 g	14 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	0.14 g	0.14 g	1.4 g	1.4 g
안정화 시간	3 s	3 s	3 s	3 s
<b>치수 및 기타 사양</b>				
저울 치수(W x D x H)	210 x 308 x 280 mm	210 x 308 x 280 mm	200 x 308 x 102 mm	200 x 308 x 102 mm
칭량 팬 지름	100 mm	100 mm	180 mm	180 mm

- ▲ 내부 중량 조정 후
- ▼ 5% 하중, k = 2에서 측정



# 특징

## 성능

- 전자기력 보상(EMFC) 계량 셀
- 외부 분동으로 조정

## 효율적인 작동

- 밝은 백라이트 LCD 디스플레이
- 3개의 내장 Application
- 전면 레벨 인디케이터
- 저울 하단의 칭량용 후크

## 품질 보증

- 과부하 보호
- 금속 바닥, ABS 상단 하우징
- 설정 보호

## 데이터 관리

- RS232 인터페이스
- Bluetooth 옵션
- 손쉬운 데이터 전송을 위한 중량 데이터 전송 기능
- MT-SICS
- EasyDirect 저울 소프트웨어

# 액세서리

EasyDirect 저울 데이터 관리 소프트웨어, 프린터 및 분동을 포함한 다양한 액세서리로 성능을 강화하고, 인체공학적 설계를 개선하며, 데이터를 효율적으로 취급하십시오.

액세서리에 대한 자세한 정보는 당사의 웹 페이지를 방문하십시오.

▶ [www.mt.com/lab-accessories](http://www.mt.com/lab-accessories)



**Mettler-Toledo GmbH**

Im Langacher 44  
8606 Greifensee, Switzerland  
[www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

기술적 무단 변경을 금지합니다.  
© 01/2024 METTLER TOLEDO. 모든 권리 보유.  
30924695A ko  
Group Marketing

[www.mt.com/LA-balances](http://www.mt.com/LA-balances)

더 많은 정보를



30924695