

MA 分析天平

簡單又高效



操作簡單

明亮的大螢幕易於閱讀，而螢幕上的說明則會引導您完成每個稱重程序。系統會自動執行計算，而且很容易將結果列印出來，或傳輸到儲存裝置。




多個介面

藉助 USB-A 與 RS232 介面，您可以將稱重資料快速無誤地傳輸至印表機或個人電腦，或連接至 USB 儲存裝置以進行簡易的資料傳輸。




可靠的效能

憑藉久經驗證的稱重技術，和使用內部測試法碼進行自動調整的功能，您可以保證測量結果一致且精確。

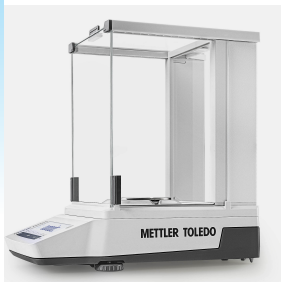

經久耐用

由於採用高品質的材料和堅固的結構，這些天平相當耐用。即使是在嚴苛的稱重環境中密集使用，您仍可信賴我們多年可靠的服務。

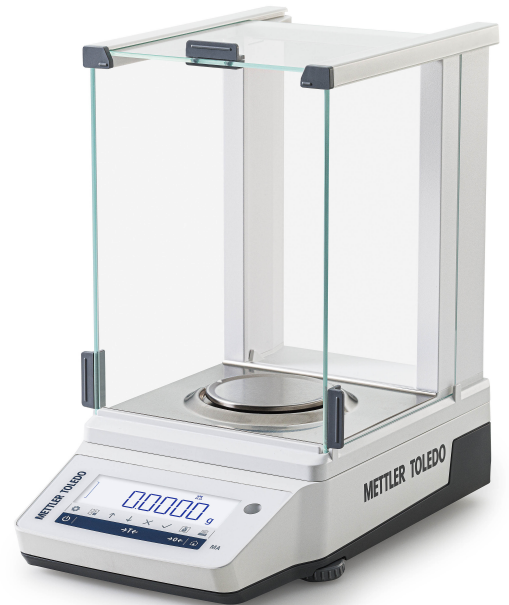

輕鬆進行日常稱重

適用於您的例行作業

這些高品質天平的操作相當直觀且易於清潔，您可以信賴這些天平的準確結果。內建的應用程式提供了簡單的說明，可自動計算並傳輸電子資料，將錯誤降到最低，並使文件記錄變得容易。

明亮的 LCD 螢幕提供出色的可讀性，玻璃表面則耐磨損且易於清潔。觸控式按鍵能讓您簡易操作天平，並瀏覽使用者介面選單。

技術規格



	MA55	MA95	MA155DU
限制值			
承重量	52 g	92 g	152 g
可讀性	0.01 mg	0.01 mg	0.1 mg
細測範圍的承重量	–	–	62 g
細測範圍的可讀性	–	–	0.01 mg
重複性 (5% 負載下)	0.03 mg	0.03 mg	0.03 mg
線型偏差	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg
靈敏度偏移量 (標稱負載下) ▲	0.4 mg	0.4 mg	0.8 mg
典型值			
重複性 (5% 負載下)	0.015 mg	0.015 mg	0.015 mg
線型偏差	0.03 mg	0.03 mg	0.06 mg
靈敏度偏移量 (標稱負載下) ▲	0.25 mg	0.25 mg	0.5 mg
最小重量 (USP · 容差為 0.10%) ▼	30 mg	30 mg	30 mg
最小重量 (容差為 1%) ▼	3 mg	3 mg	3 mg
穩定時間	4 s	4 s	4 s
尺寸與其他規格			
天平尺寸 (寬 × 深 × 高)	209 × 354 × 354 mm	209 × 354 × 354 mm	209 × 354 × 354 mm
秤盤尺寸 (寬 × 深)	–	–	–
秤盤直徑	80 mm	80 mm	80 mm

▲ 使用內部法碼調整後

▼ 於 5% 荷重下測定 · $k = 2$



	MA54	MA104	MA204
限制值			
承重量	52 g	120 g	220 g
可讀性	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
重複性 (5% 負載下)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
線型偏差	0.2 mg	0.2 mg	0.2 mg
靈敏度偏移量 (標稱負載下) ▲	0.3 mg	0.5 mg	0.8 mg
典型值			
重複性 (5% 負載下)	0.08 mg	0.08 mg	0.08 mg
線型偏差	0.06 mg	0.06 mg	0.06 mg
靈敏度偏移量 (標稱負載下) ▲	0.15 mg	0.3 mg	0.5 mg
最小重量 (USP · 容差為 0.10%) ▼	160 mg	160 mg	160 mg
最小重量 (容差為 1%) ▼	16 mg	16 mg	16 mg
穩定時間	2 s	2 s	2 s
尺寸與其他規格			
天平尺寸 (寬 × 深 × 高)	209 × 354 × 354 mm	209 × 354 × 354 mm	209 × 354 × 354 mm
秤盤尺寸 (寬 × 深)	–	–	–
秤盤直徑	90 mm	90 mm	90 mm

▲ 使用內部法碼調整後

▼ 於 5% 荷重下測定 · $k = 2$

特點

效能

- 電磁力補償 (EMFC) 稱重單元
- 內部調整

有效率地操作

- LCD 混合觸控式螢幕
- 9 種內建應用程式
- 統計資料分析
- 天平下方的稱重掛鉤
- 隨插即用

品保

- OIML/NTEP 認可
- 前方水平指示器
- 樣品 ID

配件

使用我們的 EasyDirect 天平資料管理軟體、印表機和法碼和密度套件等眾多配件，以增強效能、改善人體工學，並有效率地處理您的資料。

如需更多配件資訊，請造訪我們的網頁。

► www.mt.com/lab-accessories

資料管理

- 2 種介面：USB-A、RS232
- 藍牙 (選配)
- 傳輸重量功能輕鬆進行資料傳輸
- MT-SICS
- EasyDirect 天平軟體

永續價值

- 金屬底座，PBT 頂部外殼
- 過載保護
- 易於清潔的 QuickLock 防風護罩



Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

保留技術修改權。
© 01/2024 METTLER TOLEDO. 版權所有。
30924437A tw
Group Marketing

www.mt.com/MA-analytical

更多信息



30924437