

Tingkat Standar dan Lanjut



Timbangan Laboratorium

Penimbangan akurat

Intuitif untuk digunakan

Ringkas dan tahan lama


Timbangan Analitik dan Presisi Performa Tangguh untuk Hasil Andal

METTLER TOLEDO

Tingkat Standar dan Lanjut Timbangan Andalan Anda

Timbangan Tingkat Standar dan Lanjut menjadi andalan Anda saat bekerja di laboratorium. Timbangan tangguh ini dibuat secara ahli untuk menghadirkan performa luar biasa dari hari ke hari. Karena dibuat dari materi berkualitas dan dengan sel penimbangan berperforma tinggi, Anda dapat mengandalkan instrumen kokoh ini agar memperoleh hasil yang akurat untuk semua tugas penimbangan harian Anda.

Portofolio Tingkat Standar dan Lanjut mencakup beragam timbangan analitik dan presisi yang sesuai untuk semua persyaratan penimbangan harian Anda. Timbangan semi-mikro menawarkan daya baca 0,01 miligram untuk penimbangan sampel terkecil, sedangkan timbangan presisi platform besar dapat menangani beban hingga 32 kilogram. Selain itu, timbangan portabel kami begitu fleksibel untuk digunakan di mana pun.

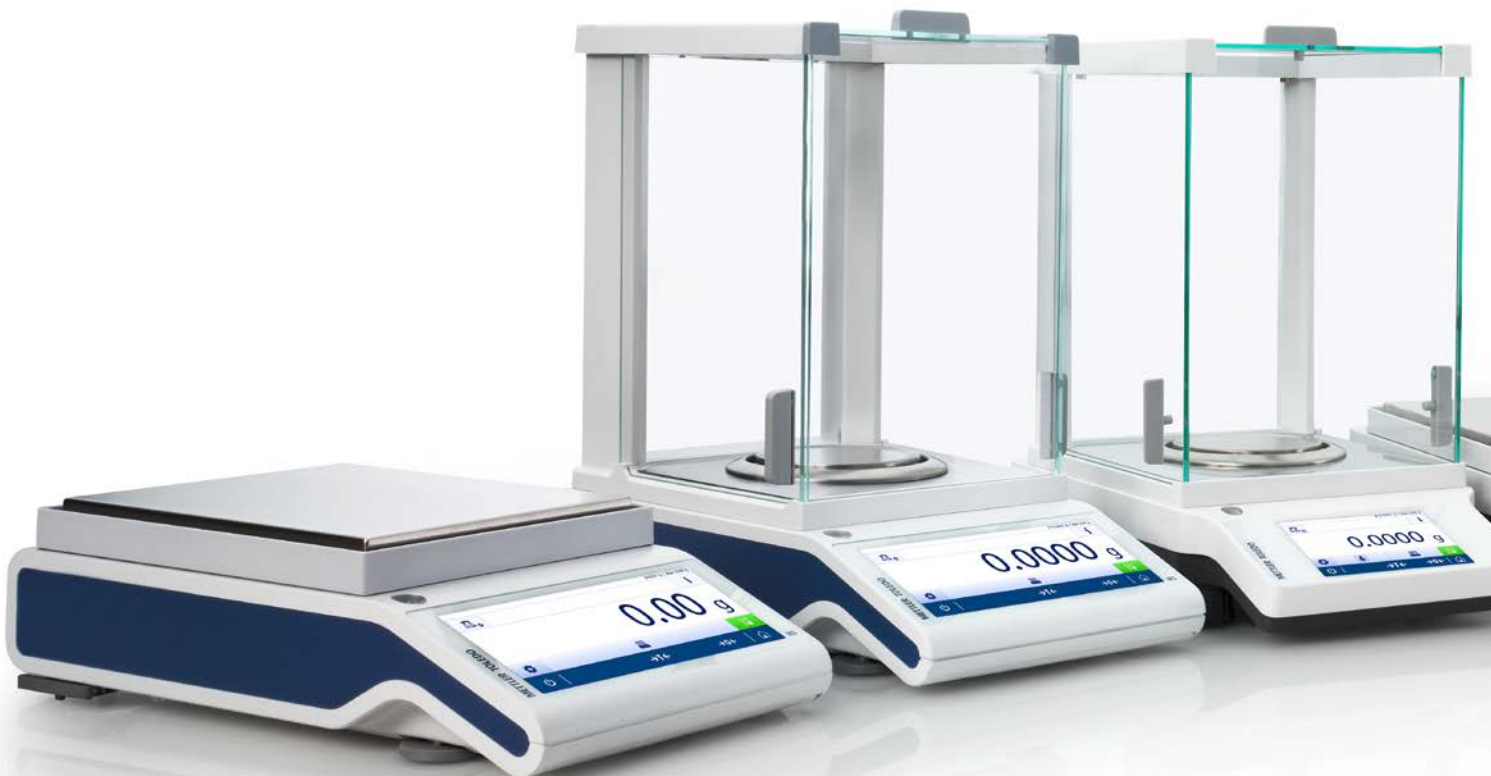



Anda dapat mengandalkan timbangan Tingkat Standar dan Lanjut untuk memperoleh hasil yang akurat dari hari ke hari.



Cara Memilih Timbangan Laboratorium yang Tepat

METTLER TOLEDO menawarkan beragam timbangan berkualitas tinggi. Namun, manakah timbangan yang tepat untuk persyaratan proses dan keakuratan khusus Anda? Dan manakah timbangan yang paling mudah dan nyaman digunakan?

Timbangan Tingkat Excellence - Performa penimbangan luar biasa dan teknologi penanganan sampel inovatif membantu tugas penimbangan yang sulit sekali pun menjadi lebih efisien, bebas kesalahan, dan sesuai.

Timbangan Tingkat Lanjut - Pilihan tepat saat Anda memerlukan performa dan daya tahan yang luar biasa. Pengoperasian intuitif dan aplikasi terintegrasi membuat proses penimbangan Anda menjadi cepat dan nyaman.

Timbangan Tingkat Standar - Mulai dunia penimbangan profesional dengan Timbangan Tingkat Standar kami yang tangguh dan mudah digunakan. Rangka berkualitas tinggi dan performa yang solid memastikan hasil penimbangan yang konsisten dan presisi.

Rekomendasi GWP® akan membantu memilih timbangan yang tepat. Dilengkapi fitur keamanan yang Anda butuhkan sebelum melakukan pembelian.

► www.mt.com/gwp-recommendation



Tersambung ke Printer

Hemat waktu dan hindari kesalahan penulisan tangan dengan mencetak dan mengarsipkan hasil Anda.




Perangkat Lunak EasyDirect™ Balance

Penanganan data secara elektronik dapat menghemat waktu dan mencegah kesalahan transkripsi secara manual. Semua data tersimpan aman di database SQL.



Data Management
Performance
Productivity

Timbangan Tingkat Standar
Fungsi dan Keterjangkauan Esensial

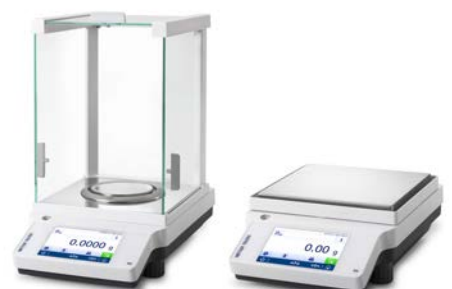

ME-T, ME, dan PL-E

LabX® Software

Fungsi manajemen data yang lengkap akan mengelola data Anda secara otomatis dan membantu mematuhi FDA CFR 21 pasal 11.



Timbangan Tingkat Excellence

Performa, Produktivitas, dan Kepatuhan



XPR dan XSR

www.mt.com/excellence-analytical
www.mt.com/excellence-precision

Timbangan Tingkat Lanjut

Keandalan, Kesenambagunaan, dan Kenyamanan



MS-TS, ML-T, MS, dan MS-L



Timbangan MS-TS

Andal dan Intuitif

Timbangan analitik dan presisi MS-TS membantu aktivitas penimbangan harian Anda dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan fungsi internal untuk transfer dan publikasi data penimbangan secara elektronik. Lebih lanjut, 11 aplikasi penimbangan pintar memudahkan tugas Anda, sedangkan sel penimbangan MonoBloc dengan fungsi FACT* yang telah dikenal menghadirkan performa penimbangan yang tinggi.

Tingkatkan efisiensi jauh lebih tinggi dengan menyambungkan timbangan MS-TS ke perangkat lunak PC EasyDirect™ Balance kami dan dapatkan semua data penimbangan hingga 10 timbangan yang ditangani secara otomatis. Menawarkan hasil yang akurat dan peningkatan produktivitas, timbangan MS-TS merupakan investasi terbaik untuk semua laboratorium.

Layar Sentuh Besar Berwarna



Tampilan layar sentuh TFT warna 7" yang besar dapat dioperasikan menggunakan sarung tangan katun, silikon, dan nitril. Antarmuka pengguna yang intuitif dan ukuran digit 18 mm menghadirkan kenyamanan untuk tugas harian Anda.

Publikasi Lanjutan



Konfigurasi cara Anda menyimpan, mencetak, dan mengeksport hasil serta data penimbangan terkait. File PDF, CSV, dan XML dapat disimpan di stik memori USB atau bahkan ke server FTP.

Rangka Sepenuhnya Logam



Rangka aluminium yang dicor tidak hanya melindungi sel penimbangan dari pengaruh dan dampak lingkungan, namun juga tahan terhadap bahan kimia yang keras, termasuk aseton.

*Penyesuaian internal yang dikontrol waktu dan suhu otomatis FACT memastikan keakuratan penimbangan yang sedang berjalan dan dapat mengurangi frekuensi pengujian timbangan rutin yang diperlukan



Manajemen Data Mudah



Kumpulkan data penimbangan hingga 10 timbangan secara otomatis dengan perangkat lunak PC EasyDirect Balance. Penanganan data secara elektronik dapat menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan transkripsi. Semua data tersimpan aman di database SQL.

Manajemen Pengguna



Peran dan hak dapat ditentukan dan diatur untuk masing-masing pengguna. Dengan manajemen pengguna yang diaktifkan, setiap aktivitas masing-masing pengguna dapat dilacak sepenuhnya.

- ▶ www.mt.com/ms-analytical
- ▶ www.mt.com/ms-precision

Timbangan ML-T

Fitur Besar, Ukuran Ringkas

Sel penimbangan berperforma tinggi, beragam pilihan interface komunikasi, dan 10 aplikasi penimbangan yang mudah digunakan, dikemas dalam desain timbangan analitik dan presisi ML-T yang ramping. Hasil dijamin akurat, berkat sistem LevelControl terpandu dan fungsi FACT.

Pilihan konektivitas yang fleksibel memudahkan Anda untuk secara cepat memasang pembaca barcode dan printer agar menyederhanakan dan mempercepat proses penimbangan. Selain itu, Anda dapat menangani semua data penimbangan secara elektronik dengan menyambung ke perangkat lunak PC EasyDirect™ Balance kami.

Rangka yang Ringkas



Desain yang ringkas akan mengoptimalkan penggunaan ruang kerja, memberi ruang tambahan yang diperlukan untuk menempatkan semua peralatan dan sampel yang dibutuhkan di dekat Anda. Mudah dipegang, khususnya bila Anda memiliki sampel yang banyak atau wadah yang besar.

Sel Penimbangan Tangguh



Sel penimbangan MonoBloc kami yang telah dikenal, dengan penyesuaian internal otomatis, memberikan hasil yang andal secara konsisten. Dengan perlindungan internal terhadap kelebihan beban, Anda dapat yakin dengan masa pakai timbangan yang lama.

Panduan Penimbangan Pintar



Panduan penimbangan di bagian atas layar membantu Anda menentukan takaran target. Layar hijau dalam aplikasi check weigher menunjukkan sekilas bahwa hasil penimbangan berada pada toleransi proses yang telah ditentukan sebelumnya.



RS232, USB, dan LAN



Beragam pilihan interface, termasuk LAN dan WLAN opsional, memungkinkan penanganan data yang mudah dan bebas kesalahan. Data dapat ditransfer ke PC, server FTP, stik memori, atau printer dalam berbagai format, termasuk file XML dan CSV.

Penyeimbangan Timbangan Terpandu



Fungsi LevelControl internal akan mengeluarkan peringatan saat timbangan tidak seimbang dan memberikan panduan di layar untuk membantu Anda menyeimbangkannya kembali dengan benar dalam hitungan detik.

- ▶ www.mt.com/mlt-analytical
- ▶ www.mt.com/mlt-precision

Timbangan Semi-Mikro MS

Untuk Kebutuhan Keakuratan yang Tinggi

Bila Anda perlu menimbang sampel yang sangat kecil dengan derajat keakuratan tinggi, timbangan semi-mikro MS adalah pilihan yang tepat. Dengan sel penimbangan HRT (High Resolution Technology) dan FACT, timbangan semi-mikro MS menawarkan keterbacaan 5 desimal (0,01 mg), sempurna untuk menimbang jumlah yang sangat kecil dan untuk memaksimalkan penggunaan zat yang langka dan berharga.

Pintu ergonomis, aplikasi yang telah diprogram sebelumnya, dan waktu penyelesaian yang cepat menunjukkan bahwa penggunaan timbangan semi-mikro MS sangat mudah dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan waktu Anda yang berharga.

Hasil yang Akurat



Sel penimbangan HRT menghadirkan keterbacaan hingga 5 desimal (0,01 mg), dipadukan dengan FACT dan dua anak timbangan internal, Anda dapat menimbang sampel terkecil dengan keakuratan tertinggi.

Penimbangan Ergonomis



Mengurangi jumlah gerakan yang diperlukan untuk setiap penimbangan: ErgoDoor memungkinkan Anda membuka pintu yang tepat dengan tangan kiri (atau sebaliknya) sehingga membuat penimbangan lebih cepat dan nyaman.

Hemat Ruang



Hemat ruang kerja berkat pintu pelindung aliran udara terpisah yang bekerja dengan tetap mempertahankan keseimbangan. Konektor di bagian belakang timbangan dipasang bersebelahan agar mudah diakses dan untuk menghemat lebih banyak ruang.



Pembersihan Mudah



Pembersihan yang sangat mudah: pelindung aliran udara QuickLock dapat dilepas hanya dalam beberapa langkah. Selain itu, panel kaca dan drip tray dapat dengan mudah dicuci di mesin pencuci piring.

Pemeriksaan Pipet



Cepat dan mudah untuk mengubah timbangan semi-mikro MS Anda menjadi stasiun pemeriksaan pipet dengan memasang perangkat evaporasi. Aplikasi internal akan memandu Anda di sepanjang proses pemeriksaan pipet.

► www.mt.com/semimicro-analytical

Timbangan Platform Besar MS-L

Performa Tangguh untuk Tugas Berat

Dengan akomodasi beban hingga 32 kilogram, timbangan presisi platform besar MS-L dibuat untuk menangani tugas tersulit Anda. Desain yang sangat kokoh dan perlindungan terhadap kelebihan beban ekstrem memastikan Anda memperoleh hasil yang andal meskipun di lingkungan penimbangan yang sulit, sedangkan sel penimbangan MonoBloc dan FACT memberi Anda kepastian bahwa hasil penimbangan akurat hingga sepersepuluh gram.

Timbangan presisi platform besar MS-L mengatasi kesulitan pengiriman hasil yang akurat dengan beban yang tinggi.

Rangka Kokoh



Rangka logam yang kokoh dan perlindungan terhadap kelebihan beban ekstrem hingga lebih dari 100 kilogram akan melindungi timbangan Anda dan memastikan performa yang konsisten dari tahun ke tahun, bahkan dengan penggunaan intensif.

Tahan Terhadap Zat Kimia



Pinggian penimbang dan rangka timbangan tahan terhadap zat kimia paling keras, termasuk aseton, sehingga membantu memastikan masa pakai timbangan lebih lama.

Detail Desain yang Pintar



Misalnya, lekukan di bagian atas pinggan penimbang memungkinkan sampel berbentuk silinder ditempatkan langsung pada timbangan tanpa perlu wadah tambahan.



Layar dengan Kontras Tinggi



Layar yang besar dan terang memastikan hasil dapat dibaca secara cepat tanpa kesalahan. Tiga SmartKey yang dapat diprogram secara bebas memungkinkan tugas rutin dapat dimulai hanya dengan menyentuh tombol.

Inventarisasi yang Mudah



Pinggian penimbang yang besar dan aplikasi penghitung butiran internal menjadikan timbangan platform besar ini sempurna untuk pencatatan inventaris.

www.mt.com/msl-precision

Timbangan ME-T

Didesain untuk Kemudahan

Akses aplikasi Anda dengan mudah dari layar utama, ikuti panduan di layar, lalu kirim hasil Anda ke printer atau PC menggunakan fungsi internal. Timbangan analitik dan presisi ME-T didesain untuk menjadikan tugas penimbangan Anda begitu mudah, cepat, dan efisien.

Dengan rangka yang kokoh, komponen tahan lama, dan perlindungan terhadap kelebihan beban, timbangan ME-T menghadirkan hasil yang andal selama bertahun-tahun ke depan.

Layar Sentuh Warna



Antarmuka layar sentuh warna 4,5" begitu mudah dan intuitif, serta dapat dioperasikan saat menggunakan sarung tangan. Petunjuk dan gambar akan memandu Anda di sepanjang prosedur penimbangan, sehingga membantu mengurangi kesalahan.

Penyesuaian Otomatis



Sel penimbangan EMFC (The Electromagnetic Force Compensation Technology) menyertakan teknologi FACT yang menyesuaikan timbangan secara otomatis menggunakan anak timbangan internal untuk memastikan hasil Anda akurat meskipun suhu ruangan berubah.

Aplikasi Terpandu



10 aplikasi internal dapat diakses dengan mudah dari layar utama. Panduan di layar disediakan agar Anda dapat dengan cepat memulai tugas check-weigher, penentuan massa jenis, statistik, formulasi, dan lainnya.



Beragam Pilihan Interface



Port USB dan RS232, serta adapter Bluetooth opsional, memungkinkan Anda tersambung ke pembaca barcode, printer, maupun PC. Transfer data begitu cepat dan mudah, serta kesalahan transkripsi dapat dicegah.

Perlindungan Kode Sandi



Dapatkan manfaat keamanan tambahan dengan kemungkinan untuk menetapkan kode sandi agar dapat melindungi pengaturan timbangan. Oleh karena itu, Anda dapat membatasi akses ke pengaturan hanya untuk staf yang berwenang dan menghindari perubahan yang tidak disengaja.

▶ www.mt.com/met-analytical
 ▶ www.mt.com/met-precision

Timbangan ME Esensial Setiap Hari

Timbangan analitik dan presisi ME menawarkan fungsi esensial yang Anda butuhkan untuk menangani tugas penimbangan harian secara akurat dan efisien. Penyesuaian timbangan sekali sentuh dan rangka yang kokoh menunjukkan bahwa Anda dapat yakin akan hasil yang andal secara konsisten, dari hari ke hari.

Komponen berkualitas tinggi, fitur praktis, dan harga yang terjangkau menjadikan timbangan ME perangkat esensial di setiap laboratorium.

Sel Penimbangan Berkualitas Tinggi



Dengan sel penimbangan EMFC dari METTLER TOLEDO, Anda dapat yakin akan performa yang akurat dan andal. Kestabilan yang tinggi memberikan hasil yang cepat sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas secara cepat dan pasti.

Penyeimbangan yang Mudah



Menyeimbangkan timbangan menjadi mudah berkat kaki penyesuai yang berukuran besar. Indikator keseimbangan berada di bagian depan sehingga mudah untuk melihat keseimbangan dan memastikan timbangan Anda berfungsi secara akurat.

Dibuat untuk Penggunaan Intens



Dengan alas berbahan logam, piringan penimbang baja antirawat, dan perlindungan terhadap kelebihan beban, timbangan ini dapat bertahan saat digunakan secara intens di lingkungan yang sulit. Permukaan yang halus dan tepian yang bulat membuatnya mudah dibersihkan dan dipelihara.



Penyesuaian Internal



Menjaga keakuratan tanpa perlu anak timbangan kalibrasi eksternal. Anak timbangan internal memudahkan Anda menguji dan menyesuaikan timbangan setiap saat hanya dengan menyentuh satu tombol.

- ▶ www.mt.com/me-analytical
- ▶ www.mt.com/me-precision

Timbangan PL-E

Ringkas dan Portabel

Timbangan PL-E menawarkan kemudahan penimbangan di mana pun dan kapan pun Anda inginkan. Timbangan yang ringan namun dibuat secara solid ini dapat dioperasikan menggunakan baterai sehingga nyaman dibawa ke mana pun Anda perlu melakukan penimbangan. Ukurannya yang ringkas juga ideal bila Anda memiliki ruangan yang sempit.

Meskipun Anda memiliki keterbatasan ruang, menginginkan portabilitas maupun kenyamanan, namun ingin memastikan hasil penimbangan yang andal, timbangan PL-E adalah solusinya.

Dimensi Kecil



Desain ultraramping menjadikan timbangan PL-E sempurna untuk ruangan sempit. Timbangan yang ringkas ini dibuat secara solid dari bahan berkualitas, namun masih cukup ringan untuk diangkat dan dibawa ke mana pun.

Pengoperasian dengan Baterai



Bila Anda perlu menimbang dalam perjalanan atau jika catu daya tidak tersedia, timbangan ini dapat dioperasikan menggunakan baterai, sehingga memberi Anda fleksibilitas penimbangan secara total.

Layar yang Cerah



Layar dengan lampu latar cerah mudah dibaca, baik dalam kondisi pencahayaan terang maupun redup. Selain itu, dengan ukuran angka yang besar, hasil penimbangan dapat dilihat secara jelas dari berbagai sudut.



Tahan Lama saat Digunakan



Timbangan tangguh ini memiliki piringan penimbang baja anti-karat dan antigores, serta permukaan yang halus dan mudah dibersihkan. Perlindungan terhadap kelebihan beban melindungi timbangan saat digunakan, sehingga Anda dapat mengandalkan performa luar biasa dari hari ke hari.

Keamanan Transportasi





Casing tambahan untuk transportasi melindungi timbangan portabel Anda dari kerusakan selama pemindahan dan memastikan masa pakai timbangan lebih lama.

www.mt.com/ple-precision

Timbangan Analitik

Perbandingan Model




Model	MS-TS		ML-T	
				
Kemudahan Penggunaan	● ● ● ● ●	Layar sentuh besar berwarna	● ● ● ● ●	Layar sentuh warna
Manajemen Data dan Konektivitas	● ● ● ● ●	EasyDirect Siap Pakai, Akses Web	● ● ● ● ●	EasyDirect Siap Pakai
Kepatuhan	● ● ● ● ●	Manajemen pengguna hingga 20 pengguna	● ● ● ● ●	Manajemen pengguna hingga 10 pengguna
Pembersihan Mudah	● ● ● ● ●	Pelindung aliran udara dan panel kaca dengan fungsi pelepasan QuickLock; rangka sepenuhnya logam untuk ketahanan terhadap zat kimia yang kuat	● ● ● ● ●	Panel kaca dengan fungsi pelepasan QuickLock
Layar	Layar sentuh TFT warna 7"		Layar sentuh TFT warna 4,5"	
Interface	Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ , Host USB ²⁾ , LAN Opsional: WLAN/Bluetooth		Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ , Host USB ²⁾ , LAN Opsional: WLAN/Bluetooth	
Kapasitas	120 g-320 g		52 g-320 g	
Daya Baca	0,1 mg		0,1 mg	

¹⁾ Port USB untuk menyambungkan timbangan ke PC




²⁾ Port USB untuk menyambungkan perangkat periferal (mis. Printer, Pembaca Barcode, dll.)



Temukan timbangan yang tepat untuk kebutuhan Anda
 ► www.mt.com/gwp-recommendation

ME-T		ME		Semi-Mikro MS	
					
● ● ● ● ● ●	Layar sentuh warna	● ● ● ● ● ●	10 aplikasi internal	● ● ● ● ● ●	Tombol fungsi yang dapat diprogram
● ● ● ● ● ●	Pencetakan, stik memori USB	● ● ● ● ● ●	Pencetakan	● ● ● ● ● ●	Pencetakan
● ● ● ● ● ●	Perlindungan kode sandi untuk pengaturan timbangan	● ● ● ● ● ●	Hasil cetak sesuai GMP/GLP	● ● ● ● ● ●	Hasil cetak sesuai GMP/GLP
● ● ● ● ● ●	Tepian halus dan permukaan yang mudah dibersihkan	● ● ● ● ● ●	Tepian halus dan permukaan yang mudah dibersihkan	● ● ● ● ● ●	Panel kaca dengan fungsi pelepasan QuickLock
Layar sentuh TFT warna 4,5"		LCD dengan lampu latar		LCD dengan lampu latar	
Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ , Host USB ²⁾ Opsional: Bluetooth		Internal: RS232 Opsional: Bluetooth		Internal: RS232, Pusat USB ¹⁾ Opsional: Bluetooth	
52 g-220 g		52 g-220 g		120 g-220 g	
0,1 mg		0,1 mg		0,01 mg-0,1 mg	

Timbangan Presisi Perbandingan Model




Model	MS-TS		ML-T		ME-T	
						
Kemudahan Penggunaan	● ● ● ● ● ●	Layar sentuh besar berwarna	● ● ● ● ● ●	Layar sentuh warna	● ● ● ● ● ●	Layar sentuh warna
Manajemen Data dan Konektivitas	● ● ● ● ● ●	EasyDirect Siap Pakai, Akses Web	● ● ● ● ● ●	EasyDirect Siap Pakai	● ● ● ● ● ●	Pencetakan, stik memori USB
Kepatuhan	● ● ● ● ● ●	Manajemen pengguna hingga 20 pengguna	● ● ● ● ● ●	Manajemen pengguna hingga 10 pengguna	● ● ● ● ● ●	Perlindungan kode sandi untuk pengaturan timbangan
Pembersihan Mudah	● ● ● ● ● ●	Rangka sepenuhnya logam untuk ketahanan terhadap zat kimia yang kuat	● ● ● ● ● ●	Dilengkapi sarung pelindung; pinggan penimbang dan ring udara yang mudah dilepas	● ● ● ● ● ●	Dilengkapi sarung pelindung; pinggan penimbang dan ring udara yang mudah dilepas
Layar	Layar sentuh TFT warna 7"		Layar sentuh TFT warna 4,5"		Layar sentuh TFT warna 4,5"	
Interface	Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ , Host USB ²⁾ , LAN Opsional: WLAN/Bluetooth		Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ , Host USB ²⁾ , LAN Opsional: WLAN/Bluetooth		Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ , Host USB ²⁾ Opsional: Bluetooth	
Kapasitas	320 g-12,2 kg		220 g-6,2 kg		120 g-6,2 kg	
Daya Baca	0,001 g-0,1 mg		0,001 g-0,1 mg		0,001 g-0,1 mg	

¹⁾ Port USB untuk menyambungkan timbangan ke PC

²⁾ Port USB untuk menyambungkan perangkat perifer (mis. Printer, Pembaca Barcode, dll.)



Temukan timbangan yang tepat untuk kebutuhan Anda
 ► www.mt.com/gwp-recommendation

ME		PL-E		MS Besar	
					
● ● ● ● ● ●	10 aplikasi internal	● ● ● ● ● ●	Tombol fungsi yang dapat diprogram	● ● ● ● ● ●	Tombol fungsi yang dapat diprogram
● ● ● ● ● ●	Pencetakan	● ● ● ● ● ●	Pencetakan	● ● ● ● ● ●	Pencetakan
● ● ● ● ● ●	Hasil cetak sesuai GMP/GLP	● ● ● ● ● ●	Hasil cetak sesuai GMP/GLP	● ● ● ● ● ●	Hasil cetak sesuai GMP/GLP
● ● ● ● ● ●	Dilengkapi sarung pelindung; piringan penimbang dan ring udara yang mudah dilepas	● ● ● ● ● ●	Dilengkapi sarung pelindung; piringan penimbang yang mudah dilepas	● ● ● ● ● ●	Rangka sepenuhnya logam untuk ketahanan terhadap zat kimia yang kuat
LCD dengan lampu latar		LCD dengan lampu latar		LCD dengan lampu latar	
Internal: RS232 Opsional: Bluetooth		Internal: RS232 Opsional: Bluetooth		Internal: RS232, Perangkat USB ¹⁾ Opsional: Bluetooth	
120 g-5,2 kg		620 g-6,2 kg		12,2 kg-32,2 kg	
0,001 g-0,1 mg		0,01 g-0,1 mg		0,1 g-1 g	

Aksesori dan Perangkat Lunak Untuk Proses Penimbangan Efisien

EasyDirect™ Balance



Mengumpulkan data penimbangan hingga 10 timbangan secara otomatis, membuat laporan, melakukan analisis statistik, dan memiliki tinjauan yang jelas tentang status timbangan. Semua data penimbangan tersimpan aman di database SQL dan dapat diekspor secara manual atau otomatis dalam berbagai format (XML, CSV, XLSX, atau PDF).

Pengukuran Massa Jenis



Pasang kit massa jenis pada timbangan untuk menentukan massa jenis pada sampel padat, cair, maupun berpori. Aplikasi internal akan memandu Anda di sepanjang proses.

Printer



Memastikan kemudahan pelacakan dengan pencetakan hasil yang cepat dan berkualitas tinggi. Menyesuaikan pencetakan agar menyertakan data penimbangan relevan lainnya seperti tanggal, waktu, ID pengguna, ID sampel, dan nomor batch.

Bluetooth/Adapter Wi-Fi



Mengirim hasil secara nirkabel dari timbangan ke PC. Anda bekerja secara elektronik, namun tidak memerlukan kabel.

Anak Timbangan



Memastikan keakuratan penimbangan yang sedang berjalan dengan menguji timbangan secara efisien hanya menggunakan dua anak timbangan; pengujian yang diperlukan adalah pada kapasitas timbangan 5% dan hampir 100%.



Perangkat lunak PC EasyDirect™ Balance kompatibel dengan semua timbangan analitik dan presisi MS, ML, maupun ME, sehingga dapat memberi Anda dokumentasi yang cepat dan bebas kesalahan, apa pun aplikasi yang digunakan. Cara paling nyaman untuk melakukannya adalah dengan timbangan MS-TS dan ML-T melalui Ethernet.

Uji Coba Gratis Perangkat Lunak

Sambungkan timbangan ke perangkat lunak PC EasyDirect™ Balance untuk menangani semua data penimbangan secara elektronik. Proses dokumentasi hasil menjadi cepat, mudah, dan bebas kesalahan. Pemasangan dan konfigurasi sangat mudah.

Coba gratis EasyDirect™ Balance selama 45 hari:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Memudahkan Pekerjaan dan Mengurangi Kesalahan

Timbangan METTLER TOLEDO dapat disesuaikan dengan aksesori dan perangkat periferil agar dapat memenuhi hampir semua kebutuhan aplikasi apa pun. Aksesori kami yang didesain secara ahli menjadikan pekerjaan Anda lebih mudah, mengurangi kelelahan, serta meningkatkan keakuratan dan produktivitas.

Lihat beragam aksesori kami secara online:

► www.mt.com/accessories

Solusi Layanan

Untuk Keakuratan Seumur Hidup

Memilih timbangan yang tepat untuk persyaratan aplikasi spesifik Anda hanyalah langkah awal dalam proses penting untuk memastikan bahwa Anda memperoleh hasil yang akurat selama masa pakai instrumen penimbangan.

METTLER TOLEDO dapat membantu Anda mencapai performa luar biasa dan keakuratan pengukuran yang tinggi secara berkelanjutan. Untuk membantu Anda menjamin kualitas produk, pengiriman tepat waktu, kepatuhan terhadap regulasi, dan keterampilan pengguna yang tepat, layanan kami mencakup pemasangan, pemeliharaan pencegahan, kalibrasi, dan perbaikan peralatan, baik untuk industri, lingkungan, atau peraturan apa pun!

Lihat portofolio layanan lengkap kami secara online:

► www.mt.com/labbalances-service

Pemasangan dan Kualifikasi Profesional



Pastikan timbangan Anda memberikan hasil yang akurat sejak hari pertama dan ditempatkan di lokasi yang optimal. Kami menawarkan tiga Pacs pemasangan dengan kualifikasi berbeda untuk memenuhi persyaratan regulasi dan aplikasi spesifik Anda.

► www.mt.com/installation

Kalibrasi dan Pengujian



ACC (Accuracy Calibration Certificate) kami mendokumentasikan keakuratan timbangan Anda di lokasi berdasarkan penggunaannya. Verifikasi GWP® akan menentukan kalibrasi berbasis risiko dan jadwal pengujian rutin untuk mempertahankan keakuratan seiring waktu.

► www.mt.com/calibration-acc

Extended Care



Extended Care akan membantu Anda mengontrol anggaran dengan menghindari pengeluaran tidak terduga terkait penurunan fungsi instrumen. Paket ini mencakup perlindungan tambahan selama 24 bulan setelah pemasangan dan dua kali kunjungan pemeliharaan untuk pencegahan.



METTLER TOLEDO Service



PERFORMA

Pemeliharaan dan Pengoptimalan

KEPATUHAN

Kalibrasi dan Kualitas

PENINGKATAN WAKTU OPERASIONAL

Dukungan dan Perbaikan



KEAHLIAN

Pelatihan dan Konsultasi

Layanan lengkap yang menawarkan Layanan METTLER TOLEDO memberi Anda kepercayaan untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan produktivitas dengan menyediakan produk layanan berdasarkan nilai layanan kami, yakni pengoptimalan waktu operasional, performa, kepatuhan, serta pelatihan.

Good Weighing Practice™



Good Weighing Practice™ (GWP®) adalah standar global yang memastikan keakuratan, kualitas, dan kepatuhan secara konsisten dalam proses penimbangan. Standar ini berlaku untuk perangkat penimbangan baru maupun lama dari produsen mana pun.

► www.mt.com/gwp

Keberadaan Layanan Global



METTLER TOLEDO menyediakan jaringan penjualan global dan spesialis servis bagi Anda. Lebih dari 5000 teknisi servis resmi kami yang terlatih untuk pabrik menggunakan alat bantu dan suku cadang eksklusif serta mengikuti prosedur kerja berstandar internasional.

Kunjungi Perpustakaan Lab Kami

Untuk Dokumen Teknis, Video, dan Webinar

Informasi lebih lanjut di:
▶ www.mt.com/lab-library



www.mt.com/balances

Untuk informasi selengkapnya

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Kontak lokal: www.mt.com/contacts

Perubahan teknis dapat terjadi sewaktu-waktu
© 09/2021 METTLER TOLEDO. Semua hak dilindungi undang-undang
30609765B
Group MarCom RITM687744 AG/IK

