

XLS+ Multichannels

RAININ
Pipetting 360°



マルチチャンネル XLS+ ピペット

軽量

最小限の力

快適な操作性

良好なバランス

軽量マルチチャンネルピペット
実感できる性能

METTLER TOLEDO

レイニンの XLS+ マルチチャンネル 軽量ながら最高のパフォーマンス

レイニンの新しい XLS™+ マルチチャンネルピペットは、マルチチャンネルピペットの操作性と性能のレベルを確実に引き上げます。この新しいモデルは最大 35% の軽量化を実現。これにより、数時間にわたるピペッティング作業の後でも、快適な操作が可能です。

XLS+ ピペットは、技術的かつ人間工学的に最も優れた最先端のマルチチャンネルピペットです。レイニンの特許取得済み LiteTouch™ System (LTS™) テクノロジーを採用したマルチチャンネルピペットは取り扱いが容易で、全チャンネルにおいて高精度で一貫性のあるサンプル採取を実現します。また、堅牢な設計と最高品質素材の採用により、長期にわたって一貫した信頼性の高い使用が可能です。そして、すべての XLS+ ピペットと同様に、内蔵された RFID タグで高度な校正のトラッキングが可能です。




軽量

ピペッティングを数時間実施した後でも快適性と性能が得られます。軽量で、手にしっかりフィットする XLS+ マルチチャンネルは、まさにワールドクラスの仕上がりになっています。



抜群の操作感

レイニンの XLS+ マルチチャンネルは、市場で最も容易で高性能のマルチチャンネルピペットです。すべてのモデルと容量範囲で、最初から最後まで円滑で非常に一貫性のあるストロークが実現します。

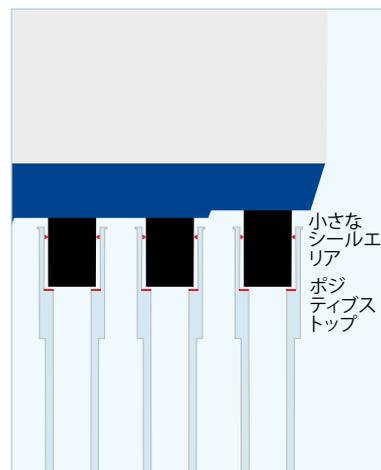

最軽量のタッチ

人間工学的性と取り扱いの容易さにおいてレイニンの特許取得済み LiteTouch システム (LTS) に勝るものはなく、迅速なチップの装着、完全な密封、簡単なチップのイジェクションが実現します。また、新たに開発された抵抗の少ないシールと軽いスプリングで、これまで以上に手にやさしくなりました。



チャンネルの一貫性

必要最小限のシーリングエリアとポジティブストップにより、LTSはすべてのチャンネルで迅速で完全な密封状態を実現します。揺り動かしたり、手で締めたりする必要はありません。完璧なシールにより、常に一貫性のあるサンプル採取が全チャンネルで実現します。



高速のスループット

レイニンの E4 XLS+ 電動マルチチャンネルピペットを使用することでプレート作業を高速化が図れます。特殊モードにより、複数の液体の移動、連続希釈の実施および一連の容量移動のプログラミングなどが効率化できます。



Pipet-Lite XLS+ および E4 XLS+ モデル

レイニン XLS+ マルチチャンネル ピペット

手動および電動モデル



Pipet-Lite XLS+ (手動)

| 製品名 | 品番 | 容量範囲 |
|-----------------|----------|-------------|
| 8 チャンネル | | |
| L8-10XLS+ | 17013802 | 0.5–10 µL |
| L8-20XLS+ | 17013803 | 2–20 µL |
| L8-50XLS+ | 17013804 | 5–50 µL |
| L8-200XLS+ | 17013805 | 20–200 µL |
| L8-300XLS+ | 17013806 | 20–300 µL |
| L8-1200XLS+ | 17014496 | 100–1200 µL |
| 12 チャンネル | | |
| L12-10XLS+ | 17013807 | 0.5–10 µL |
| L12-20XLS+ | 17013808 | 2–20 µL |
| L12-50XLS+ | 17013809 | 5–50 µL |
| L12-200XLS+ | 17013810 | 20–200 µL |
| L12-300XLS+ | 17013811 | 20–300 µL |
| L12-1200XLS+ | 17014497 | 100–1200 µL |

E4 XLS+ (電動)

| 製品名 | 品番 | 容量範囲 |
|-----------------|----------|-------------|
| 8 チャンネル | | |
| E8-10XLS+ | 17013792 | 0.5–10 µL |
| E8-20XLS+ | 17013793 | 2–20 µL |
| E8-50XLS+ | 17013794 | 5–50 µL |
| E8-200XLS+ | 17013795 | 20–200 µL |
| E8-300XLS+ | 17013796 | 20–300 µL |
| E8-1200XLS+ | 17014498 | 100–1200 µL |
| 12 チャンネル | | |
| E12-10XLS+ | 17013797 | 0.5–10 µL |
| E12-20XLS+ | 17013798 | 2–20 µL |
| E12-50XLS+ | 17013799 | 5–50 µL |
| E12-200XLS+ | 17013800 | 20–200 µL |
| E12-300XLS+ | 17013801 | 20–300 µL |
| E12-1200XLS+ | 17014499 | 100–1200 µL |

レイニン LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。

Rainin、Pipet-Lite、E4、XLS、XLS+、LTS、LiteTouch、Pipetting 360° は、Rainin Instrument, LLC の商標です。

www.mt.com/rainin

詳細情報はこちらへ

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
TEL: 03-5815-5515 FAX: 03-5815-5525

製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

© 04/2014 Rainin Instrument, LLC

Printed on demand from online content. 17700754